

# CSP-160 IR IR通信プリンタ

プリンタ

IR通信(赤外線通信)で計量データを直接受信、印字が可能

## 特長

- カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応
- 計量後にデータを自動印字
- データの分析が可能なヒストグラム機能
- 標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字
- DLZ-200のIR通信に対応
- 別途プリンタケーブルをご購入の場合、周辺機器出力・RS-232C出力を装備した計量器にも接続可能



## 仕様

型式	CSP-160 IR
印字方式	5×7ドットマトリックス カセットインクリボン
記録紙	45mm幅 普通紙ロール
電源	AC100V(専用ACアダプタ)
付属品	ACアダプタ、インクリボン1個、ロール紙2巻
外形寸法(WDH)	155×145×47.5mm
税抜価格	¥80,000

## オプション

型式	製品名	税抜価格
-	インクリボン1セット(5個)	¥3,000
-	ロール紙1セット(20巻)	¥2,500
-	DLZ-プリンタ設置金具	¥20,000

※安全箇所でご使用ください。

# RTS-M series マルチチャンネル+多機能版ソフト

データ取り込みソフト

当社製電子天びんのデータをダイレクトにパソコンに取り込み、計量データの管理やリスト作成、分析、解析などに活用できるデータベース構築が可能

## 特長

- 最大接続台数16台まで拡張可能(RTS-M4:最大4台、RTS-M8:最大8台)
- パソコン画面が外部表示器代わりになります。(最大4CH分)
- Excelのセルにダイレクトに取り込み、取り込み方向の指定も可能
- 取り込みデータはテキストファイルに保存可能
- インターバル機能内蔵
- ISO/GLP/GMPデータ対応



## 仕様

型式	RTS-M4	RTS-M8
ソフト	1枚(CD-ROM)	1枚(CD-ROM)
取扱説明書	1部	1部
RS-USB変換器	1台(USBケーブル1m付属)	2台(USBケーブル1m付属)
USBハブ	なし	1台(USBケーブル1m付属)
RS接続ケーブル	10m×4本	10m×8本
税抜価格	¥310,000	¥500,000

※はかりからデータ出力するためには、はかり側にRS-232C単方向、双方向またはRSパックなどの出力オプションが必要です。

※周辺機器出力、プリンタ出力には対応していません。

※標準RS接続ケーブルコネクタ:はかり側=DIN 5P(オス)、パソコン側=D-sub 9P(メス)。

※Excelなどのアプリケーションは含みません。

※USB以外にLANに接続することもできます。別途お問い合わせください。


※対応OS:Windows 7(32ビット/64ビット)

Windows 8(32ビット/64ビット)、Windows 8.1(32ビット/64ビット)

Windows10(32ビット/64ビット)、Windows11(64ビット)



設定画面

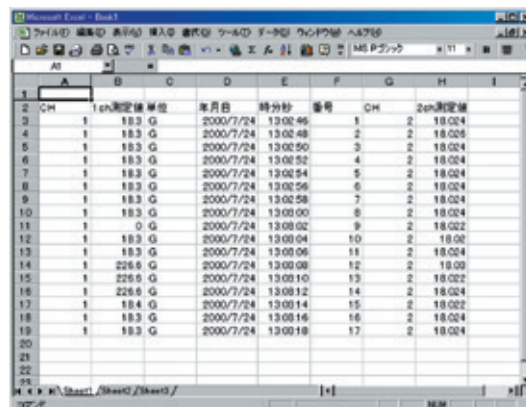

パソコン画面の計量表示

## データ取り込みソフト(シングルチャンネル版) RTS

当社ホームページより無償ダウンロードできます。メニューの「各種ダウンロード」へお進みください。

- RSケーブルが別途必要です。(接続機種によって種類が異なります)  
ケーブル一覧 P89
- 計量データを変換してUSBインターフェイスパソコンに取り込めるコンバータとケーブルのセットもご用意していますので、ご相談ください。