

※1 CZ-B320S、CZ-B620Sのみ ※2 CZ-B320S、620Sを除く

ひょう量:320g~15kg/最小表示:0.001g~1g

バックライト液晶表示

専用風防<sup>※1</sup>

乾電池駆動

IP65規格適合防塵・防水<sup>※2</sup>

# CZ-B series/CZ-BS series

高精度タイプ

本質安全

防爆構造電子はかり

音叉式カセンサ

音叉センサ  
5年保証<sup>※3</sup>

乾電池駆動だから移動が容易で、  
表示が見やすい防爆天びん  
サビや薬品に強いステンレスボディ


本質安全防爆構造  
Ex ia II B T4適合  
第TC19302号



CZ-B320



CZ-B3200

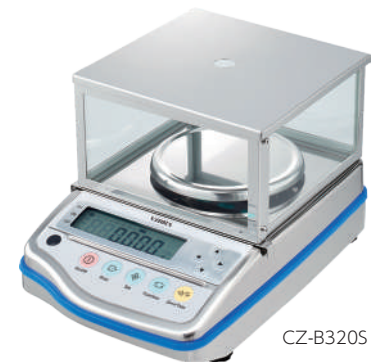

CZ-B320S

## 特長

- 耐久性・清掃性に優れた防塵・防水構造
- 見やすい大型バックライト液晶表示
- 計量したデータの印字や保存が可能

## 仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 表示部 バックライト液晶表示、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁
- 温湿度範囲 5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
- 電源 単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本  
連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)
- 出力 IR通信

### 【ベーシックタイプ】

型式	CZ-B320	CZ-B620	CZ-B3200	CZ-B6200	CZ-B15K
ひょう量(Max)	320g	620g	3200g	6200g	15kg
最小表示	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	1g
直線性	±0.01g	±0.01g	±0.1g	±0.1g	±1g
再現性(σ)	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	1g
計量皿寸法	φ140mm		W190×D190mm		
外形寸法(WDH)	212×322×92mm		212×322×92mm		
本体重量	約2kg		約2.5kg		
税抜価格	¥260,000	¥290,000	¥260,000	¥290,000	¥260,000

### 【高精度タイプ】

型式	CZ-B320S	CZ-B620S	CZ-B3200S1	CZ-B6200S1	CZ-B15KS2
ひょう量(Max)	320g	620g	3200g	6200g	15kg
最小表示	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.1g
直線性	±0.003g	±0.003g	±0.03g	±0.03g	±0.2g
再現性(σ)	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ140mm		W190×D190mm		
外形寸法(WDH)	212×322×183mm (ガラス風防標準装備)		212×322×92mm		
本体重量	約2kg		約2.5kg		
税抜価格	¥420,000	¥450,000	¥370,000	¥400,000	¥370,000

## 周辺機器

型式	製品名	税抜価格
DLZ-200	データロガー	¥165,000
CSP-160 IR	IR通信プリンタ	¥80,000
BTZ	Bluetooth出力ユニット	¥165,000
-	はかり取り付け金具(DLZ用)	¥20,000
-	はかり取り付け金具(BTZ用)	¥20,000

## 耐久性・清掃性に優れた防塵・防水構造

IP65規格適合の防塵、防水構造だから耐久性があり様々な環境でご使用できます。また、水洗いもできるため、清掃性にも優れコンタミネーション対策も可能です。(CZ-B320S、620SはIP44相当または準拠)

## 見やすい大型バックライト液晶表示

見やすい文字高さ18mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。操作中断が続くと自動的にオフになり、消費電力を抑えます。

## 計量したデータの印字や保存が可能

データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZの使用によりデータの印字や保存が可能です(周辺機器・オプション別売)

## 計量可能範囲が一目でわかるバーグラフ表示

ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。重い風袋を使用した際に後どれくらい計れるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。

電子天びん

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

係数モード

比重モード

動物測定モード

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISCS機能

CR機能

ACR機能

周辺機器出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

RTS無償ダウンロード